

# Untersuchungsleuchte für medi-matic® Behandlungsstühle



- **Optimale Ausleuchtung des Untersuchungsbereichs**
- **Hohe Lichtleistung bis 50.000 Lux**
- **Einfache Montage am Untersuchungsstuhl**
- **Hohe Energieeffizienz dank LED-Technologie**
- **Lebensdauer > 30.000 h**

# Die Basis für präzises Arbeiten



## LED-Untersuchungsleuchte\* Modell-Nr. 101.3100.0

mit flexibel einstellbarem Flexarm, Lichtleistung 50.000 Lux bei 0,5 m, 3 wählbare Farbtemperaturen und 5 Dimmstufen, keine Wärmeabstrahlung, wartungsfrei, Gehäuse aus Polycarbonat, reinweiß RAL 9010, Netzanschlussleitung 2 m lang, 110-240 V, 50/60 Hz. Benötigt zur Befestigung den Halter 101.3110.0, 101.3120.0 oder 101.3130.0!



## Teleskopständer, rechts\* Modell-Nr. 101.3110.0

zur Befestigung der LED-Untersuchungsleuchte 101.3100.0 auf der rechten Seite direkt am medi-matic Untersuchungsstuhl, stufenlos höhenverstellbar von 600 mm bis 970 mm, aus rostfreiem Stahl.

## Teleskopständer, links\* Modell-Nr. 101.3120.0

wie 101.3110.0, jedoch zur Anbringung auf der linken Seite. (ohne Abb.)




## Teleskopständer für Kolposkophalterung\* Modell-Nr. 101.3130.0

Standrohr zur Befestigung der LED-Untersuchungsleuchte 101.3100.0, zur Verwendung am medi-matic Untersuchungsstuhl mit Kolposkophalterung, stufenlos höhenverstellbar von 800 mm - 1.400 mm, aus rostfreiem Stahl. Nachrüstbar an bereits bestehender Kolposkophalterung.

### Technische Daten

Bestückung	1 LED Modul
Lichtleistung	50 000 Lux / 0,5 m
Beleuchtungsfeld 0,5 m	Ø 17 cm
Farbtemperatur	ca. 3400 K / 3800 K / 4300 K
Betriebsgerät	Elektronischer Converter
Anschlusswerte	100-240 V; 50/60 Hz
Netzanschlussleitung	ca. 2 m
Leuchtgehäuse	Polycarbonat (PC)
Gewicht (netto)	ca. 1,5 kg
Leistungsaufnahme	ca. 25 W
Bedienung	Folientastatur, Wippschalter (I/O)
Gelenkentlastung	Friktion
Schutzklasse	I
Zubehör	Andere Netzleitungen verfügbar
Normen	EN 60601-1, EN 60601-2-41
Besonderheiten	3 Farbtemperaturen, 5 Dimmstufen, wartungsfrei

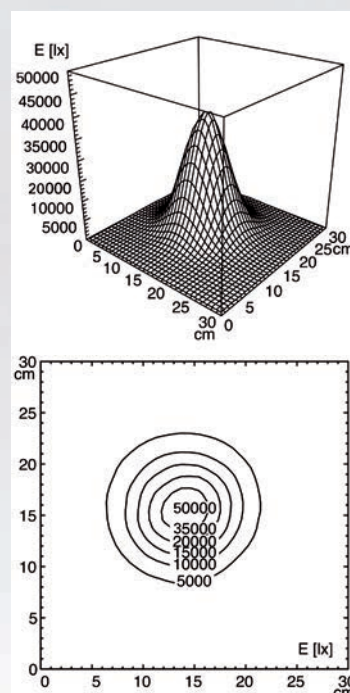

Konstruktions- und Maßänderungen vorbehalten. Geringe Farbabweichungen sind technisch bedingt möglich.

Schmitz-Flyer Nr. 107, 01.2018

\*Dieser Artikel ist Handelsware, welcher unter dem OEM-Namen vertrieben wird.

SCHMITZ u. Söhne GmbH & Co. KG, Zum Ostfeld 29, 58739 Wickede (Ruhr)

T +49 (0)2377 84 0, F +49 (0)2377 84 162, [www.schmitz-soehne.com](http://www.schmitz-soehne.com)

[f/schmitz.soehne](https://www.facebook.com/schmitz.soehne)